

内視鏡カート JIS T 0601-1 適合※

内視鏡 オペ室

※JIS T 0601-1: 確立されたリスクマネジメントの概念および方法論に基づいて、医療機器規格の作成者が規格に安全側面を導入する際の要求事項および推奨事項について規定。
この内視鏡カート自体は医用電気機器ではないが、上記の規格の該当する要求事項に適合している。




▲手術室設置例

JIS T 0601-1※に適合。操作性抜群の内視鏡カート

アーム標準搭載

カート上部にバルーンアーム2
高荷重タイプを標準搭載
しています。

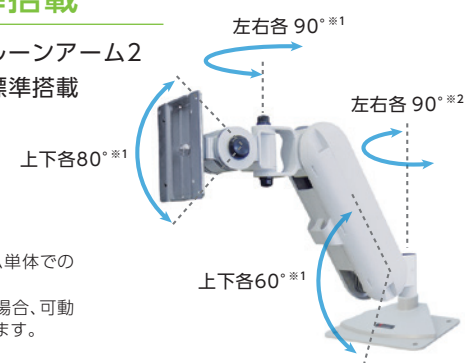

※1: 可動範囲はアーム単体での
数値です。
※2: カートに搭載した場合、可動
範囲は90°になります。


らくらく全輪ストッパー

踏むだけで同時に4つのキャスターをロックと解除することが
できます。立ったまま足でロック操作が可能です。



棚の高さ調整可能

搭載機器に合わせて棚の
高さを調整することが
できます。

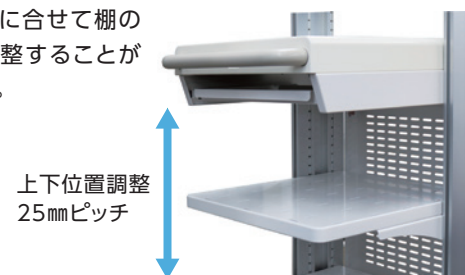

便利なキーボードトレイ

キーボードトレイを標準搭載。キーボードを載せたまま
収納することが可能です。



～32V対応




型番	FMC01-BA-4R
VESA	75×75, 100×100
寸法	W660×H1410×D789(mm) ※アーム含まず
素材	アルミニウム合金/プラスチック/スチール



背面扉の開閉および配線用
クランプは左右どちらでも
設定可能です。

※トランスを搭載しないタイプ
もございます。

■寸法図

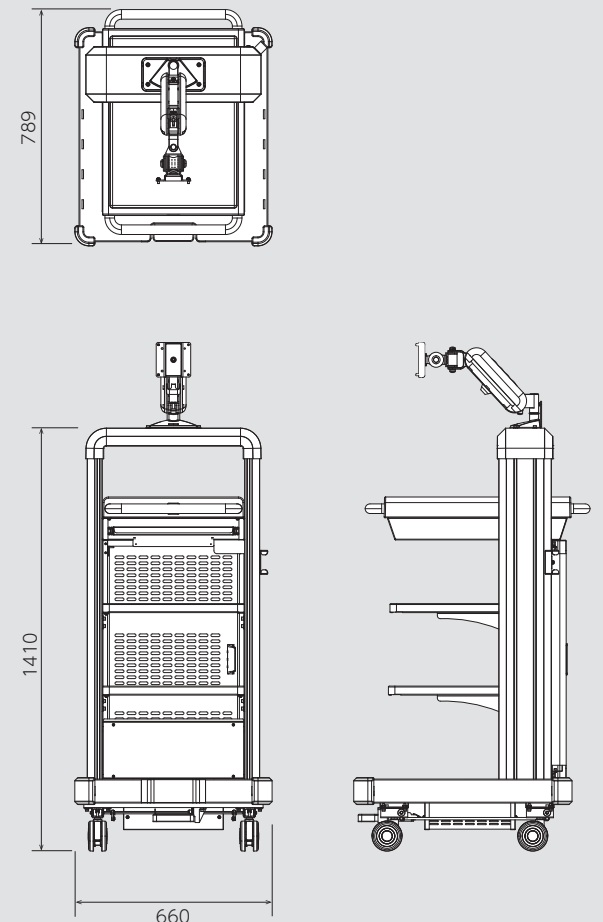

電源・トランス



仕様
入 力: 100V～50-60HZ 1400VA ※1
出 力: 100V～50-60HZ 1350VA ※2
システム用コンセント: 5×2口=10口
等電位化端子付き



※1: 電源スイッチ(ブレーカー)が「入」の状態、システムスイッチが「切」の状態では、
内部の分離変圧(絶縁トランス)によって、0.12Aの励磁電流が流れています。
※2: システム用コンセントに接続する機器の消費電力は、1350VAを超えないように
注意してください。

オプション品

サイドアーム
【MS-SBA-NP2S】

ガスボンベホルダー
【FMC-OP-BO】

スコープホルダー
【FMC-OP-SO-L】

※製品およびオプションの仕様は、品質改良・安全性向上のため予告なく変更する場合があります。



この製品の
POINT! ワンタッチ操作で全キャスターのロック・解除が可能。移動がスムーズに行えます!