



## 敷くだけカンタン設置

床面アンカー施工が不要で、フラットベースを敷き置くだけで。短時間で完工できます。




## スキャナを最適な位置へ

使用環境に合わせ、スキャナを最適な作業位置へ調整可能です。



## モニタを見やすい位置へ

モニタを見やすい位置・角度へ調整可能なアームを採用しています。

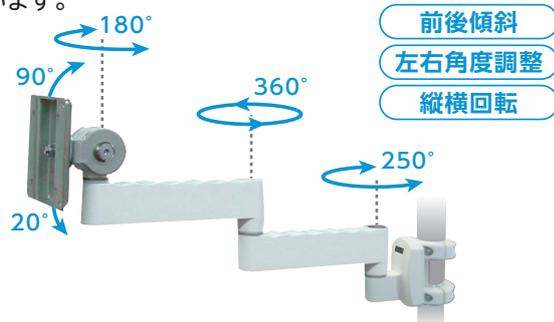

## カスタマイズ対応

排水口などの障害物を考慮したベースサイズにカスタマイズが可能です。

※事前の現地調査が必要です。



# 内視鏡洗浄履歴管理システム用 アームスタンド


アーム耐荷重  
**9kg**

RoHS  
指令準拠

VESA	75×75, 100×100
寸法	W660×H1620×D700(mm)
質量	約42kg
素材	スチール製
スタンド色	ホワイト



## ■寸法図

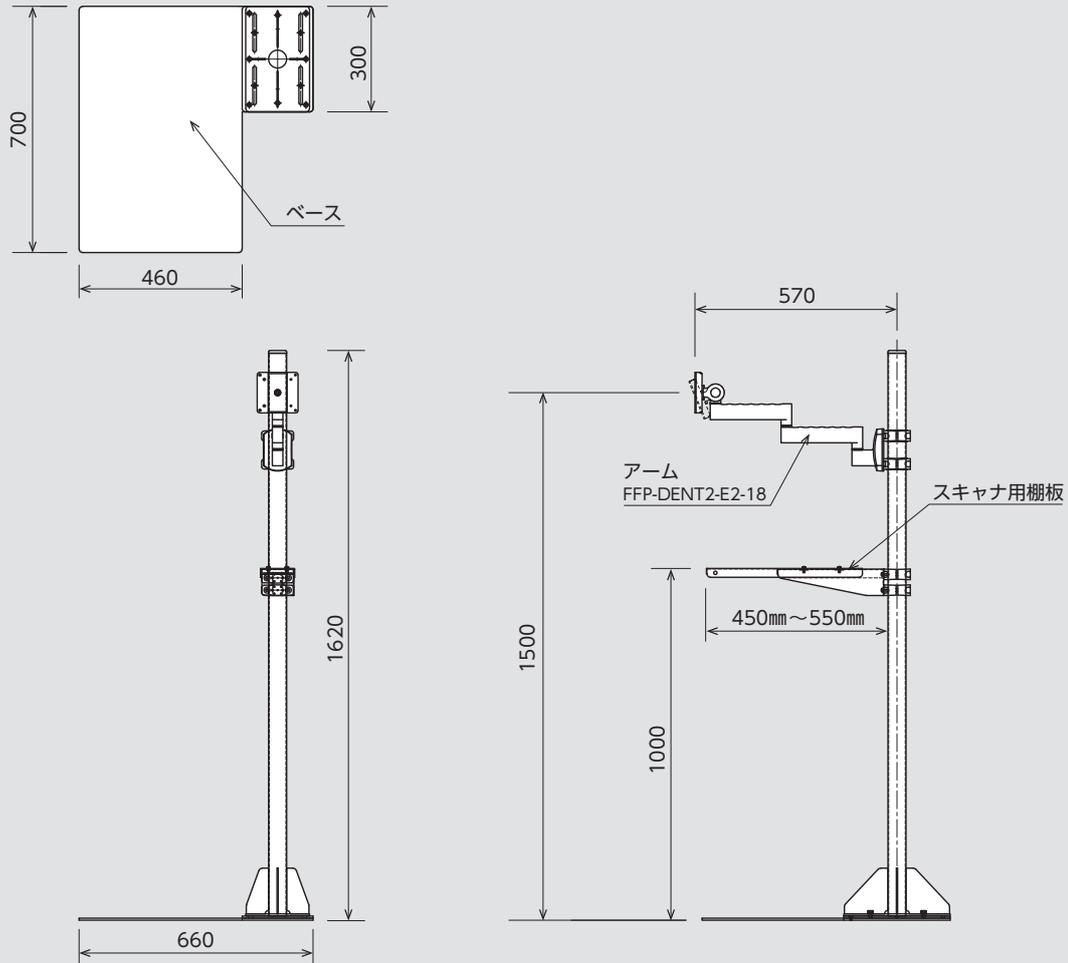

## 施工手順



**1** ベースを敷き、ポールを取り付ける。



**2** ポールにスキャナ用棚板を取り付ける。



**3** ベースの上に内視鏡洗浄装置を設置。



**4** ポールにアームを取り付ける。



**5** モニタとスキャナを設置したら完成。

**FORVICE** 日本フォームサービス株式会社

URL: <https://www.forvice.co.jp> E-Mail: [info@forvice.co.jp](mailto:info@forvice.co.jp)

本社・営業部 〒136-0071 東京都江東区亀戸6-25-1 フォービスビル4階 TEL: 03-3636-0011  
 関西営業所 〒540-0012 大阪市中央区谷町5-6-12 新野村ビル6階 TEL: 06-6767-7771  
 千葉工場 〒289-1751 千葉県山武郡横芝光町長山台1-4 TEL: 0479-82-2121



お気軽に  
お問合せ  
ください